

**Gelbe, hochgoldhaltige Universallegierung: Goldgusslegierung nach EN ISO 22674 und Keramikaufbrennlegierung nach EN ISO 9693** für Inlays, Onlays, Dreiviertelkronen, Einzelkronen, kleine Brücken, Brücken großer Spannweite, Fräs-, Konus- und Geschleibetechnik, Modellguss.

## Legierungsbeschreibung

### LEGIERUNGSZUSAMMENSETZUNG:

75,0 Au, 9,1 Pt, 13,1 Ag, 2,0 Zn  
(Ir, Ta, Rh ≤ 1% Massengehalt)

**FARBE:** Gelb

**EIGENSCHAFT:** Extrahart, Typ 4

### INDIKATION:

Inlays, Onlays Dreiviertelkronen, Einzelkronen, kleine Brücken, Brücken großer Spannweite, Fräs-, Konus- und Geschleibetechnik, Modellguss

## Technische Daten

Dichte g/cm <sup>3</sup>	16,7
Schmelzintervall °C	1020-1090
Härte n. Vickers HV 5/30 selbst ausgehärtet	140
Härte n. Vickers HV 5/30 nach dem Keramikbrand	190
Härte n. Vickers HV 5/30 ausgehärtet	200
0,2%-Dehngrenze ausgehärtet MPa	450
0,2%-Dehngrenze selbst ausgehärtet MPa	320
E-Modul GPa	100
Bruchdehnung % selbst ausgehärtet	15
Bruchdehnung % ausgehärtet	5
Vorwärmtemperatur °C	750
Schmelztiegel	Graphit oder Keramik
Gießtemperatur °C	1240
Aushärten °C/min	550/15
Oxidbrand ohne Vakuum °C/min	800/6
Mittlerer WAK 25–500 °C 10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup>	15,8
Mittlerer WAK 25–600 °C 10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup>	16,2
<b>Geeignete Lote/Laserdraht:</b>	
Verwendung als Aufbrennlegierung	
Vor dem Brand:	Multiceral® plus-Lot, gelb, 920 °C
Nach dem Brand:	AuroLot 700 plus, gelb, 700 °C
Verwendung als Gusslegierung	
	L2 plus, gelb, 780 °C
	L3 plus, gelb, 750 °C
Laserdraht:	D-KOOS Auronorm® plus

### NEBENWIRKUNGEN

Möglich sind Überempfindlichkeitsreaktionen (Allergien) auf Bestandteile der Legierung sowie elektrochemisch bedingte, örtliche Missempfindungen.

### WECHSELWIRKUNGEN

Bei approximalem oder antagonistischem Kontakt nichtartgleicher Legierungstypen können galvanische Effekte auftreten.

### GEGENANZEIGEN

Erwiesene Überempfindlichkeit gegen einen Bestandteil der Legierung.

### SICHERHEITSHINWEIS:

Metallstäube und Dämpfe sind gesundheitsschädlich. Beim Schmelzen, Abstrahlen und Ausarbeiten ein geeignetes Absaugsystem benutzen!

**NUR ZUM DENTALEN GEBRAUCH.**



## Verarbeitungsempfehlungen

### MODELLATION

Zu verblendende Kronen und Brückenglieder in verkleinerter anatomischer Zahnform modellieren. Approximale Verbindungsstellen belastungsgerecht gestalten (Querschnitt min. 8 mm<sup>2</sup>). Girlanden im Palatinal- bzw. Lingualbereich auch bei Zwischengliedern durchmodellieren. Eine Mindestwandstärke bei Einzelkronen von 0,3 mm und für Pfeilerkronen bei Brückenkonstruktionen von 0,5 mm, sollten in ausgearbeitetem Zustand nicht unterschritten werden.

### GUSSKANÄLE

Direkte Methode: Einzelkronen mit Gusskanal: Ø 3,5-4 mm

Indirekte Methode: Einzelkronen und Brückengerüste:  
Gusskanal vom Kegel zum Gußbalken: Ø 4-5 mm • Gussbalken: Ø 5 mm Verbindung zur Krone/Brückenglied: Ø 3-4 mm Länge min. 5 mm, ggf. Luftabzugskanäle an den Approximalverbindungen von Ø 1 mm vorsehen.

### EINBETTEN

Nur phosphatgebundene Einbettmassen für Kronen und Brücken verwenden. Mischungsverhältnis in Bezug auf gewünschte Expansion, entsprechend der Gebrauchsanweisung, beachten.

Unsere Empfehlung: KOOS UNIVERSAL Einbettmasse.

### GIESSEN/AUSBETTEN

Bei allen Schmelz- und Gießverfahren ist eine Überhitzung der Schmelze zu vermeiden. Die Angaben der Gießanlagenhersteller sind zu beachten. Die legierungsspezifischen Gießparameter (Vorwärmtemperatur/Schmelzintervall/Gießtemperatur und verwendbare Tiegel) sind in der nebenstehenden Tabelle gelistet. Die Gießform langsam auf Raumtemperatur abkühlen lassen. Gussobjekte vorsichtig ausbetten und Einbettmassenreste mit Aluminiumoxyd (50–125µm/max. 2,0 bar Druck) entfernen.

### OBERFLÄCHENKONDITIONIERUNG

Gerüste mit kreuzverzahnten Hartmetallfräsern und keramisch gebundenen Steinen, unter geringem Anpressdruck, ausarbeiten. Auf einheitliche Bearbeitungsrichtung zu achten, damit Materialverschiebungen vermieden werden. Keine DIAMANTEN verwenden! Oberfläche anschließend mit Aluminiumoxid (110–125 µm / max. 2,5 bar Druck) abstrahlen und gut abdampfen. Nach dem Reinigen mit einer Klemme halten und nicht mehr berühren.

### OXIDBRAND/KERAMISCHE VERBLENDUNG

Oxidbrand: Gemäß Angaben in nebenstehender Tabelle. Hochexpandierende LFC-Verblendkeramiken sind geeignetem WAK verwenden. Gebrauchsanleitung des verwendeten Keramiksystems beachten. Die höchste Keramik-Brenntemperatur sollte mindestens 40° C unterhalb der Solidus-Temperatur liegen.



### LÖTEN/LASERSCHWEISSEN

Geeignete Lote/Laserdraht gemäß nebenstehender Datentabelle. Auf einen parallelwandigen Lötpalt von 0,05–0,2 mm achten. Lötflächen müssen metallisch blank sein und durch KOOS Universal-Lötpaste vor Oxidation geschützt werden. Oxide und Flussmittelreste nach dem Löten mit geeignetem Beizmittel entfernen.

### POLIEREN

KOOS Diamantpolierpaste (oder Produkt Ihrer Wahl)

## ANBRINGUNG DER GUSSKANÄLE

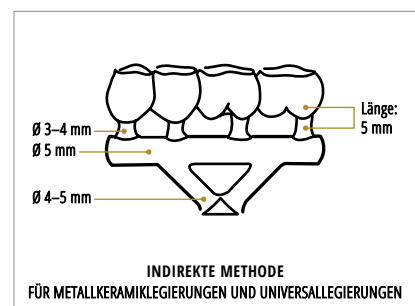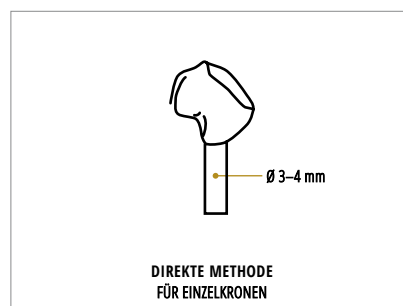

Unsere Verarbeitungsempfehlungen sind nur als Anregung für die Anwendung zu verstehen. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.